

Periodontoloģijas pacientiem

Pirmo Sonicare zobu birstes pasūtījumu veica Amerikas Periodontoloģijas akadēmija 1992. gadā.

Spiediena sensors
Dažādi intensitātes iestatījumi
Oksidācijas nodrošināšana



Philips Sonicare
FlexCare Platinum
Connected

Philips Sonicare
ProtectiveClean Gum
Health

Philips Sonicare
AirFloss Ultra

Gingivīts



Iekaisušu, pietūkušu un jutīgu smaganu gadījumā vispiemērotākie būs **Optimal Gum Care** birstes galviņas mīkstie sariņi.



Kad jutīgums mazinās, pāreiet uz **ProResults Standard** birstes galviņu.



Ja pacientam novērojamas sakodiena anomālijas, jutīgumam samazinoties, iesakām pāriet uz **InterCare Mini** birstes galviņu.



Ar antibakteriālu mutes skalojamo līdzekli uzpildāmais **AirFloss Ultra** ir papildus veids, kā rūpēties par iekaisušām smaganām un veicināt to atveseļošanos.



Optimal Gum Care



ProResults Standard



InterCare Mini



AirFloss Ultra
uzgalis

Smaganu recesija (atsegtas saknes)



Ja pacientam diagnosticēts periodontīts un zobiem ir atsegtas saknes, iesakām **Premium Plaque Defence** birstes galviņu ar plaša pārklājuma sariņu vēzieniem.



InterCare Standard birstes galviņas garākie sariņi ir lieliski piemēroti starpzobu spraugu tīrīšanai.



Premium Plaque Defence



Premium Gum Care



InterCare Standard



Sensitive Standard



AirFloss Ultra
uzgalis

Šajā gadījumā nepiemērota izvēle būtu **Sensitive Mini** birstes galviņa, jo zobu tīrīšana nesniegtu labākos iespējamus rezultātus

Periodontālās kabatas




Pateicoties šķidruma dinamikas fenomenam, tiek ierosināta oksidācija smaganu rievās, starpzobu spraugās un periodontālajās kabatās, palīdzot samazināt anaerobo mikrofloru. Zobu tīrīšanas nodrošinātā masāža veicina asinscirkulāciju smaganās.

Ieteikumi



Iesakām katru dienu veikt zobu birstes galviņu sanitizāciju

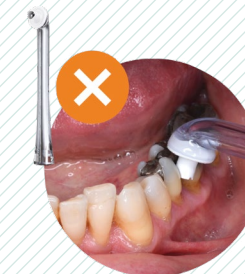

Nenovietojiet **AirFloss Ultra** ierīces uzgali tieši periodontālajās kabatās



Pacientiem ar periodontoloģiskām problēmām zobi būtu jātīra ilgāk (4-6 minūtes)